




Eichfähige Personenwaage PCE-PS 200MM (M Klasse III)

Eichfähige Personenwaage bis 200 kg / verstellbarer, manueller Größenmessstab /
Tarierfunktion / rutschsichere, große Plattform / RS-232-Schnittstelle, optionale Software


Die Personenwaage ist jedem bekannt und viele wiegen sich wöchentlich oder sogar täglich, um das eigene Gewicht konstant zu halten. Das ist gut und auch gesund, denn ein moderates Gewicht bildet die Basis für Gesundheit und Wohlbefinden und kann mit dieser Personenwaage mit Größenmessstab immer wieder überprüft werden. Die Personenwaage verfügt über eine große, rutschsichere Plattform um Unfälle durch wegrutschen bei der Wägung (z.B. nach dem Duschen) oder ein kippen der Waage zu vermeiden. Durch den mechanischen Größenmessstab können Sie bei dieser Personenwaage nicht nur das Gewicht sondern auch die Körpergröße aufnehmen. Der Größenmessstab ist seitlich verstellbar, sodass auch das Ablesen der Größe durch andere (z.B. in der Arztpraxis oder im Krankenhaus) möglich ist, während die zu messende Person weiterhin auf der Personenwaage steht. Aufgrund dieser Daten können Sie mit einer einfachen Rechnung den BMI (Body Mass Index) ermitteln. Hier finden Sie eine [Personenwaage](#), die den BMI automatisch berechnet. Der BMI ist ein Indikator dafür, ob ein Mensch Normal-, Über- oder Untergewichtig ist. Der Body Mass Index berechnet sich nach folgender Formel: Körpergewicht in kg geteilt durch Körpergröße in Metern zum Quadrat oder $BMI = x \text{ kg} / (y \text{ m} * y \text{ m})$ wobei $x = \text{Gewicht in kg}$ und $y = \text{Größe in m}$. Eine Übersicht aller medizinischen Waagen sehen Sie [hier](#). Sehen Sie sich bitte nachfolgend die Merkmale / technischen Daten an. Sollten Sie Fragen zur Personenwaage oder zu anderen Modellen haben, so rufen Sie uns bitte an oder mailen uns eine Nachricht. Unsere Ingenieure und Techniker beraten Sie sehr gern zu allen [Waagen](#) von PCE Instruments.

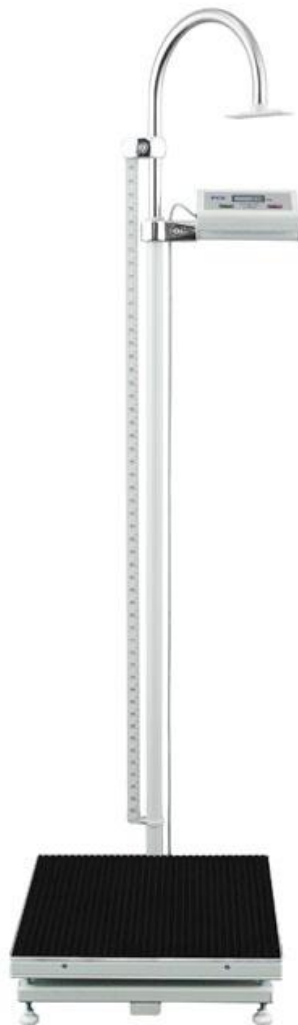

- rutschsichere, große Plattform
- verstellbarer, manueller Größenmessstab (mit der Größe und dem Gewicht lässt sich der BMI sehr leicht errechnen)
- Einfache Tastatur zur leichten Bedienung
- Messung in 100 g-Schritten
- Wägebereich: 200 kg
- Hold-Funktion
- Tarierung über den kompletten Wägebereich
- RS-232 Schnittstelle / optionale Software
- Netzadapter für 230 V serienmäßig
- eichfähig nach Eichklasse M III




Hier sehen Sie das Display der Personenwaage PCE-PS 200MM mit der einfachen 2-Tasten Bedienung

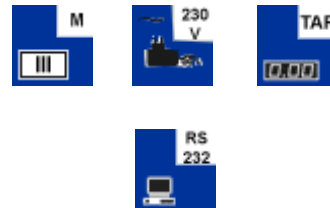

Technische Daten

Wägebereich	200 kg
Ablesbarkeit	100 g
Eichwert	100 g
Mindestlast	2 kg
Größenmessstab	102 ... 198 cm ablesbar in 2 mm Schritten
Eichklasse	III
Tarierbereich	voller Wägebereich
Wägeeinheiten	kg
Einschwingzeit	2 s
Anzeige	LCD-Display (Hintergrundbeleuchtung)
Netzadapter	230 V / 50 Hz
Abmessung Wägeplattform Gesamt	35 x 35 cm 45 x 48 x 132 cm
zul. Umgebungstemp.	+10 ... +40 °C
Gewicht	ca. 8,5 kg

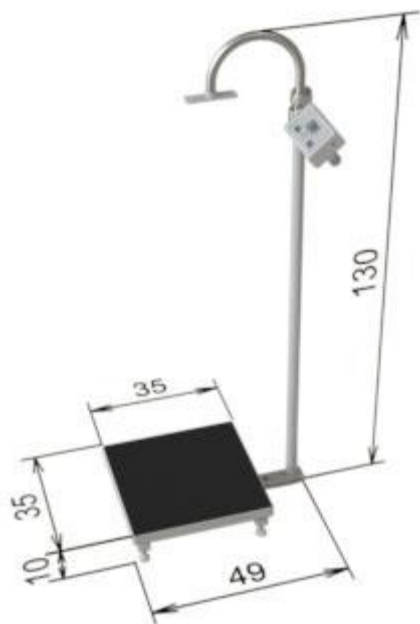

PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)

<http://www.warensortiment.de/>



Lieferumfang

1 x Personenwaage PCE-PS 200MM mit Größenmessstab, 1 x Netzteil, Bedienungsanleitung

Erhältliches Zubehör

Software-Paket

Deutschsprachige Software inklusive RS-232 PC-Schnittstellenkabel. Die Software dient zur direkten Übertragung der Wägeregebnisse mit Uhrzeit / Datum zum Computer. Die Daten können auch an andere Tabellenkalkulationsprogramme, wie z.B. MS Excel, gesendet werden. Wenn Sie aber eine USB - Schnittstelle am Computer oder Laptop haben, müssen Sie einen USB-Adapter benutzen.



RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig wird dieses Software-Paket der Personenwaage mit RS-232-Datenkabel ausgeliefert. Wenn Sie die Messdaten zum Laptop oder irgendeinem anderen tragbaren Speichermedium übersenden möchten, benötigen Sie diesen USB- Adapter (inklusive Treiber-Software).



Drucker

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation). Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232-Druckerkabel und 240 V Netzadapter, die Papierbreite beträgt 112 mm.



Eichung Klasse M III

Eine Eichung (**Ersteichung**) kann **nur bei** einer **Erstbestellung** durchgeführt werden. Nach einer amtlichen Eichung darf eine Waage nicht mehr mit einem externen Kalibriergewicht kalibriert werden. Eine Ersteichung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren, danach muss die Waage jährlich nachgeeicht werden.



Hier finden Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Personenwaage"

- [Personenwaage PCE-PS 15MBS](#)
(eichfähige Babywaage, LCD-Display, Wägebereich bis 15 kg; RS-232 Schnittstelle)
- [Personenwaage PCE-PS 200MA](#)
(eichfähige Personenwaage, LCD-Display, Wägebereich bis 200 kg; RS-232 Schnittstelle)

