




## Geeichte Sportwaage PCE-PS 200MPC (M Klasse III)

Geeichte Sportwaage bis 200 kg / gut ablesbares Display / Trierfunktion / rutschsichere, große Plattform / RS-232-Schnittstelle, optionale Software

Die eichfähige (geeichte) medizinische Personenwaage ist eine für den Wettkampfsport entwickelte Sportwaage. In Zusammenarbeit mit Wettkampfsportveranstaltern haben wir diese eichfähige (geeichte) Sportwaage entwickelt und für den rauen, schnellen, aber genauen Wiegeeinsatz der Gewichtsklasseermittlung ausgelegt. So ist die Sportwaage möglichst klein und funktionell gehalten. Die Reaktionszeit der geeichten Sportwaage ist auf 1-2 Sek. reduziert und ermöglicht somit eine schnelle und sichere Gewichtsermittlung Ihrer Sportteilnehmer und -nehmerinnen. Die praktische Abmessung der Wiegefläche von 35 x 35 cm, ihre niedrige Aufstiegshöhe und die gummierten Standfüße sorgen selbst auf Fliesenboden für sicheren Stand. Die Wiegefläche ist mit rutschfester und leicht zu reinigender Gummibeschichtung überzogen, was, außer dem Sicherheits- und Hygienefaktor, noch zusätzlich dem Wohlfühlfaktor des zu wiegenden Sportlers beiträgt. Die zwei Tasten Bedienung macht das schnelle Gewichtsermitteln sehr einfach und die Holdfunktion hilft Ihnen das ermittelte Gewicht bis zur Eintragung in die Startunterlagen im Display einzufrieren, selbst wenn der Sportler (die Sportlerin) die Sportwaage schon verlassen hat. Die eichfähige Sportwaage besitzt einen Akku der Ihnen eine Arbeitszeit von ca. 80 Std. ermöglicht und Sie am Aufstellort von der Stromversorgung unabhängig macht. Selbstverständlich können Sie die Sportwaage auch mit dem im Lieferumfang befindlichen Netzteil betreiben, was gleichzeitig zum Aufladen des Akkus führt. Das Display ist an einem 1,5 m langen Kabel mit der Wiegeplattform verbunden und mit einem Aufstellhalter versehen. Dieser garantiert Ihnen einen guten sichtbaren Stand auf dem Aufstelltisch. Die kompakte Gesamtabmessung der geeichten Sportwaage ermöglicht Ihnen ein bequemes Verstauen der Waage in fast jeder Sporttasche. Die medizinische Sportwaage wird bereits geeicht ausgeliefert, was Ihnen zeitaufwendige und kostenintensive Behördengänge erspart. Die Ersteichung ist für zwei Jahre gültig und sollte dann jährlich nachgeeicht werden. Eine Übersicht aller medizinischen Waagen sehen Sie [hier](#). Sehen Sie sich bitte nachfolgend die Merkmale / technischen Daten an. Sollten Sie Fragen zur Sportwaage oder zu anderen Modellen haben, so rufen Sie uns bitte an oder mailen uns eine Nachricht. Unsere Ingenieure und Techniker beraten Sie sehr gern zu allen [Waagen](#) von PCE Instruments.

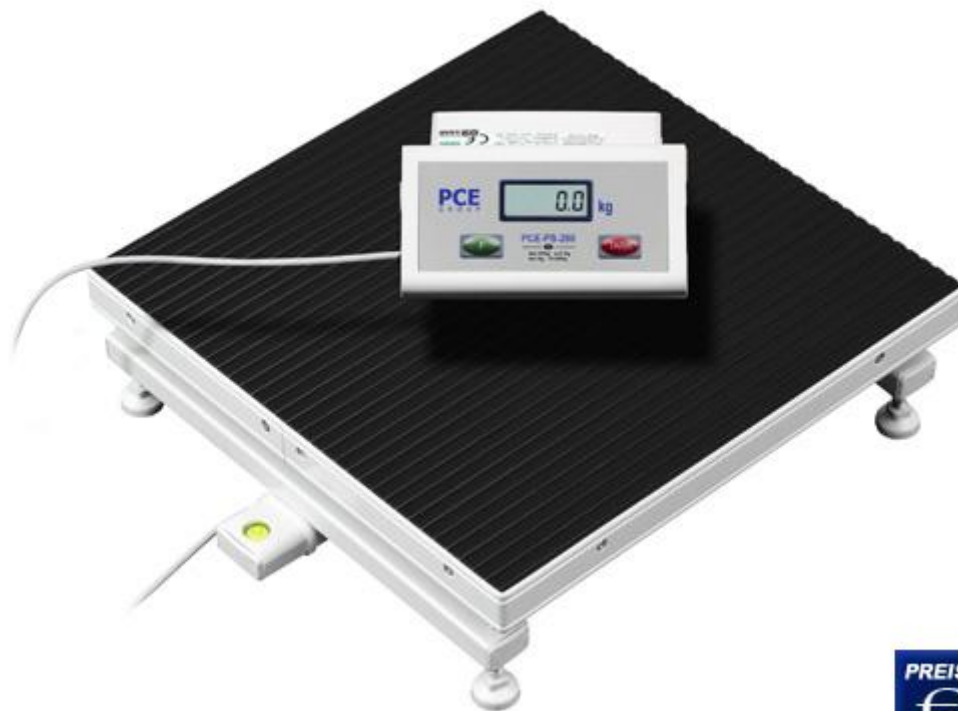

- rutschsichere, große Plattform
- gut ablesbares Display an 1,5 m Kabel
- Einfache Tastatur zur leichten Bedienung
- Messung in 100 g-Schritten
- Wägebereich: 200 kg
- Hold-Funktion

- Tarierung über den kompletten Wägebereich
- RS-232 Schnittstelle / optionale Software
- Netzadapter für 230 V serienmäßig
- Integrierter Akku für bis zu 80 Std. Betriebsdauer
- eichfähig nach Eichklasse M III




Hier sehen Sie die Sportwaage PCE-PS 200MPC im Einsatz bei der Überprüfung der Einhaltung der Gewichtsklassen bei Taekwondo-Wettkämpfen



## Technische Daten

Wägebereich	200 kg
Ablesbarkeit	100 g
Eichwert	100 g
Mindestlast	2 kg
Eichklasse	III
Tarierbereich	voller Wägebereich
Wä geeinheiten	kg
Einschwingzeit	2 s
Anzeige	LCD-Display (Hintergrundbeleuchtung)
Netzadapter	230 V / 50 Hz
Akku	12 V / 100 mA
Abmessung Wägeplattform Gesamt	35 x 35 cm 35 x 38 x 10 cm
zul. Umgebungstemp.	+10 ... +40 °C
Gewicht	ca. 7 kg

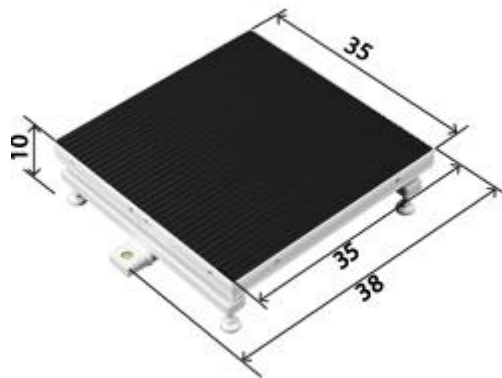

Hier sehen Sie das Display der Sportwaage PCE-PS 200MPC mit der einfachen 2-Tasten Bedienung

## Lieferumfang

1 x Personenwaage PCE-PS 200MPC mit Display an 1,5 m Kabel, 1 x Akku,  
1 x Netzteil, Bedienungsanleitung



## Erhältliches Zubehör

### Software-Paket

Deutschsprachige Software inklusive RS-232 PC-Schnittstellenkabel. Die Software dient zur direkten Übertragung der Wäageergebnisse der Sportwaage mit Uhrzeit / Datum zum Computer. Die Daten können auch an andere Tabellenkalkulationsprogramme, wie z.B. MSExcel, gesendet werden. Wenn Sie aber eine USB - Schnittstelle am Computer oder Laptop haben, müssen Sie einen USB-Adapter benutzen.



### RS-232-USB-Adapter

Standardmäßig wird dieses Software-Paket der Sportwaage mit RS-232-Datenkabel ausgeliefert. Wenn Sie die Messdaten zum Laptop oder irgendeinem anderen tragbaren Speichermedium übersenden möchten, benötigen Sie diesen USB-Adapter (inklusive Treiber-Software).



### Drucker

Zum direkten Ausdruck der Ergebnisse (z.B. zur Dokumentation). Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232-Druckerkabel und 240 V-Netzadapter, die Papierbreite beträgt 112 mm.



### Eichung Klasse M III

Eine Eichung (**Ersteichung**) kann **nur bei** einer **Erstbestellung** durchgeführt werden. Nach einer amtlichen Eichung darf eine Waage nicht mehr mit einem externen Kalibriergewicht kalibriert werden. Eine Ersteichung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren, danach muss die Sportwaage jährlich nachgeeicht werden.



Hier finden Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Personenwaage"

- [Personenwaage PCE-PS 15MBS](#)  
(eichfähige Babywaage, LCD-Display, Wägebereich bis 15 kg; RS-232 Schnittstelle)
- [Personenwaagen PCE-PS 200MM](#)  
(eichfähige Personenwaage, bis 200 kg und 100 g Auflösung, manuelle Größenmessung)
- [Personenwaagen PCE-PS 200MA](#)  
(Personenwaage bis 200 kg und 100 g Auflösung, autom. Größenmessung, BMI Ermittlung)

